

MYTREX AQUA LIFT

Manual de instruções

Sotsu Medical Co., Ltd.
3-1-10-5F, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture, Japan
Designed in Japan. Made in China.
©2023 SOTSU MEDICAL CO., LTD.
www.mytrex.es

Serviço ao cliente em Espanha e Portugal MYTREX
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h | info@mytrex.es | Tel. +34 93 474 952

Proibido distribuir por Internet. Marca S.M.
Código de barras: 4 543 000 000000
Serviço ao cliente: info@mytrex.es | Tel. +34 93 474 952

Obrigado por adquirir os nossos produtos. Utilize atentamente este manual de instruções antes de utilizar o produto, para garantir a sua segurança e adequação.

Precauções de segurança

Utilize o aparelho de acordo com os procedimentos estabelecidos e não o utilize de forma inadequada. Se ocorrer alguma situação anómala, pare imediatamente de utilizar o aparelho e contacte o nosso serviço de apoio ao cliente para obter ajuda. Não continue a utilizar o aparelho se estiver a funcionar mal, pois isso pode ter efeitos adversos para a sua saúde e ser perigoso.

Aviso

- Proibido**
- Os seguintes utilizadores de equipamentos médicos eletrónicos não devem utilizar o dispositivo:
 - Os seus funcionários dos dispositivos médicos eletrónicos terá graves repercussões no organismo.
 - Dispositivos médicos eletrónicos implantados, como pacemakers cardíacos.
 - Equipamentos médicos eletrónicos de manutenção da vida, como máquinas de suporte vital, aparelhos de respiração artificial.
 - Dispositivos médicos eletrónicos portáteis, como eletrocardiogramas.

Termos e condições

A Inov8 Iberia S.L. garante este produto por um período de 3 anos em todas as suas peças e contra qualquer defeito de fabrico e funcionamento a partir da data de entrega ao consumidor final e sem qualquer custo para este.

Esta garantia não será válida nos seguintes casos:
 * Quando os dados da garantia ou do comprovativo de compra não correspondem ao produto.
 * Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes das normais ou se for utilizado sem ter em conta o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.
 * Quando o produto tiver sido alterado ou reparado por pessoal não autorizado.

Cuidado com o meio ambiente e eliminação de resíduos:
 Os aparelhos eletrónicos e eletrónicos (AEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e o ambiente, quando a eliminação dos resíduos não é feita corretamente.

Os aparelhos eletrónicos e eletrónicos e as baterias devem estar marcados com este símbolo, o que significa que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas devem ser separados. Para esse efeito, todas as cidades estabelecem sistemas de recolha nos quais a eliminação de aparelhos eletrónicos e eletrónicos e baterias pode ser entregue gratuitamente na estação de reciclagem local ou noutro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informações, contacte a direção técnica local.

Aviso

- Proibido**
- As seguintes pessoas não devem utilizar o dispositivo. Mesmo que não se enquadre nas seguintes condições, consulte um médico se sentir desconforto ou estiver em tratamento.
 - Indivíduos com doenças cutâneas, como dermatite atópica, eczema, etc.
 - Indivíduos com sensibilidade sensível, especialmente aqueles com pele sensível.
 - Mulheres grávidas, lactantes ou menstruadas.
 - Indivíduos com doenças autoimunes.
 - Indivíduos com endometriose e miomas uterinos.
 - Indivíduos com problemas e distúrbios cutâneos devido a produtos que contêm silicone.
 - Indivíduos com doenças agudas, doenças infecciosas, tumores malignos ou tuberculose.
 - Indivíduos com doenças viscerais.
 - Indivíduos com doenças que possam causar artrose, como fraturas e osteofitos.
 - Indivíduos com distúrbios neurológicos e alterações de sensibilidade cutânea.
 - Indivíduos que não conseguem operar de forma independente, precisam descansar ou têm dificuldades na sensibilidade.
 - Indivíduos com dificuldades de expressão, paralisados ou com alterações sensoriais.
 - Pessoas com distúrbios hemorrágicos, hemofilia ou outras anomalias sanguíneas.
 - Intoxicação com hipoclorito.

Precauções de segurança

Aviso

- Proibido**
- As seguintes pessoas não devem utilizar o dispositivo. Mesmo que não se encontre nas seguintes situações, consulte um médico se sentir desconforto ou estiver em tratamento.
 - Indivíduos com doenças cardíacas ou condições sanguíneas.
 - Pessoas com problemas de saúde.
 - Pessoas com objetos metálicos implantados no corpo, como pregos.
 - Indivíduos com doenças na área a ser massajada ou aqueles com histórico médico.
 - Indivíduos em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas.
 - Indivíduos que tomam medicamentos hipotensivos.
 - Indivíduos que tomam medicamentos (como anticoagulantes) que diminuem a coagulação do sangue.
 - Indivíduos a quem um médico tenha aconselhado a não receber massagens.
 - Pessoas submetidas a tratamento médico.
 - Pessoas com febre (38 graus centígrados ou mais).
 - Crianças e bebês não devem utilizar este produto.
 - Não utilize este produto com semina de extração.

● Não o coloque em contacto com metais ou outros produtos durante a sua utilização, pois isso pode danificar o aparelho.

Armazenamento do produto

● Após o uso, guarde o dispositivo assim que estiver completamente seco e carregado. O adaptador CA especializado não é resistente à água, e a carga o dispositivo enquanto estiver molhado pode causar mau funcionamento. Ao limpar o terminal de carregamento do dispositivo e do adaptador CA especializado, use um cotonete para remover a humidade e o pó.

● Ao guardar o dispositivo por um longo período, coloque-o na posição horizontal em um saco de malha seco com a superfície marcada voltada para baixo.

● Desligue o dispositivo e desconecte o adaptador CA especializado da tomada quando não estiver em uso.

● Não guarde o dispositivo perto de chamas abertas, em locais quentes e úmidos, como banheiros ou dentro de carros, nem em áreas com muita humidade. Guarde-o em um local limpo, bem ventilado e fresco.

● Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.

● Se o dispositivo não for utilizado durante um período prolongado, desligue-o e guarde-o após carregá-lo.

● Após aproximadamente um mês de armazenamento, recarregue o dispositivo antes de utilizá-lo, pois a bateria pode não carregar se não for utilizada por muito tempo.

Especificações

Marca	MYTREX
Nome do produto	AQUA LIFT
Fonte de alimentação nominal	DC5V 1A
Adaptador CA especial	Entrada: AC100-240V 50/60Hz 0,35A, Saída: DC5V 1A
Consumo de energia	Aproximadamente 500mW
Bateria	Bateria de lítio 3,7V 300mAh
Temporizador	Desligamento automático em 15 minutos
Tamanho/Peso	Aprox. 420x380x34mm / Aprox. 1,1kg
Número de impulsos	5Hz~65Hz
Material	Silicone, policarbonato
Capacidade de carga máxima	100 kg
Duração da bateria*	A mais longa: aproximadamente 15 horas (Nível 1) A mais curta: aproximadamente 4 horas e meia (Nível 20)
Temperatura da água recomendada	38°C~45°C

* O tempo real pode variar dependendo do ambiente e das condições de utilização.

Precauções de segurança

Aviso

- Proibido**
- Não utilize outros dispositivos EMS ou dispositivos eletrónicos simultaneamente com este produto, pois isso pode causar lesões, acidentes e falhas de funcionamento.
 - Não exponha o aparelho a água quente (mais de 60 graus centígrados), pois ele pode deformar-se e derreter.
 - Não deixe o aparelho ligado à corrente, pois isso pode causar acidentes e ferimentos.
 - Não dobre nem danifique o dispositivo perfurando-o, pois isso pode prejudicar as suas propriedades de impermeabilidade, causar sobreaquecimento, incêndios e falhas de funcionamento.

● Não permita que crianças ou pessoas com deficiências físicas utilizem o aparelho sozinhas. Os menores devem ser supervisionados com o consentimento de um responsável. Além disso, não guarde o aparelho em locais acessíveis às crianças, pois isso pode causar ferimentos e acidentes.

Restrições de uso


● Não permita que crianças ou pessoas com deficiências físicas utilizem o aparelho sozinhas. Os menores devem ser supervisionados com o consentimento de um responsável. Além disso, não guarde o aparelho em locais acessíveis às crianças, pois isso pode causar ferimentos e acidentes.

Quanto às zonas de uso

Ajustando o ângulo do assento e a posição do dispositivo, para permitir o contacto com toda a parte inferior do corpo.

● Se for utilizado em várias zonas, o tempo total de utilização deve ser limitado a cerca de 15 minutos.

● Não utilize o aparelho na parte superior do corpo (acima do peito).

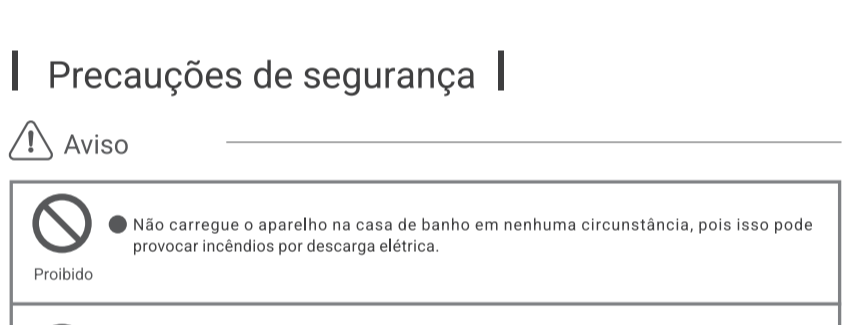

Aviso

- Proibido**
- Não utilizar nas seguintes zonas fora da área designada, pois pode causar acidentes e problemas com a pele e o corpo:
 - Áreas que tenham sido submetidas a cirurgia plástica.
 - Áreas com queimaduras, como dermatite ou exposição excessiva ao sol.
 - Áreas com espinhas, feridas, eczemas, inchaços ou doenças purulentas.
 - Áreas com contusão ou sensações de calor.
 - Áreas com sinais inflamatórios ou viragens virais.
 - Parte superior do corpo (acima do corcabo), rosto, cabeça, corcabo e áreas circundantes.
 - Áreas genitais, mucosas, etc.
 - Abdomen durante a menstruação.
 - Áreas que tenham sido submetidas a um tratamento de depilação no mesmo dia.
 - Áreas com implantes de metal, silicone, etc.
 - Áreas com tatuagens.

● Não permita que o dispositivo ou o terminal de carregamento entre em contacto com fixos ou afilados, pois isso pode provocar incêndios causados por descargas elétricas.

● Não utilize um secador de cabelo ou outro dispositivo ou acessório de secagem com o aparelho, pois isso pode causar deformação ou mau funcionamento das peças.

Precauções de segurança

Aviso

- Proibido**
- Não carregue o aparelho na casa de banho em nenhuma circunstância, pois isso pode provocar incêndios por descarga elétrica.
 - Não utilize o aparelho se ele emitir um odor anormal ou calor excessivo. Se o aparelho ou os seus acessórios emitirem um odor anormal ou calor excessivo, pare de utilizá-lo imediatamente, pois isso pode causar danos e incêndios.

● Não utilize nem coloque o dispositivo perto de chamas abertas, em ambientes com altas temperaturas ou empoeirados. Além disso, não jogue o dispositivo no fogo, não o aqueça, não o carregue em altas temperaturas, não o coloque no micro-ondas nem o coloque perto de produtos quentes. O dispositivo contém uma bateria recarregável, e fazer isso pode causar superaquecimento, incêndios, explosões ou mau funcionamento.

Cuidado com os riscos de incêndio

● Não utilize nem coloque o dispositivo perto de chamas abertas, em ambientes com altas temperaturas ou empoeirados. Além disso, não jogue o dispositivo no fogo, não o aqueça, não o carregue em altas temperaturas, não o coloque no micro-ondas nem o coloque perto de produtos quentes. O dispositivo contém uma bateria recarregável, e fazer isso pode causar superaquecimento, incêndios, explosões ou mau funcionamento.

Aviso

- Proibido**
- Não utilize o aparelho para fins diferentes daquelas para as quais foi concebido. Não o utilize para além do descrito nas instruções, pois isso pode provocar avarias e danos no aparelho.
 - Não utilize combinações de peças inadequadas. Não utilize o adaptador CA dedicado de forma inadequada, como processando-o, prendendo-o ou aplicando força excessiva, pois isso pode causar danos.
 - Não pendure objetos pesados nem utilize o aparelho de forma inadequada, pois isso pode danificá-lo.
 - Não utilize tomadas elétricas danificadas nem utilize o aparelho com um adaptador de corrente ou uma tomada solta, pois isso pode provocar incêndios causados por curto-circuitos.
 - Não deixe o aparelho cair. Não o coloque num local instável nem deixe cair o dispositivo ou os seus acessórios, pois isso pode causar ferimentos e danos no dispositivo.

● Para selecionar o nível de estimulação, pressione os botões de intensidade (+/-) para aumentar ou diminuir o nível.

● Ao pressionar o botão, o aparelho vibrará uma vez para indicar a mudança de nível.

● O nível de estimulação pode ser ajustado de 1 a 20. O nível de estimulação pré-instalado é 1.

● Se premir o botão mais forte (+) quando estiver a utilizar o nível máximo (nível 20) ou premir o botão mais fraco (-) quando estiver a utilizar o nível mínimo (nível 1), o dispositivo emitirá um sinal sonoro e vibrará três vezes para notificar o usuário de que atingiu o nível máximo ou mínimo.

● Ao ajustar para o nível 2 ou superior, certifique-se de usar o dispositivo na água. Se o aparelho for retirado da água, ele retornará ao nível 1 após cerca de 3 segundos por segurança.

● Se o aparelho parar repentinamente durante a utilização, mantenha pressionado o botão de ligar durante cerca de 2 segundos. O dispositivo emitirá um sinal sonoro e vibrará para indicar que foi desligado.

● O aparelho desligar-se-á automaticamente após 15 minutos de utilização.

● Se utilizar o Aqua Lift fora da banheira, siga estas instruções para garantir higiene, segurança e um melhor desempenho.


Recomendações de roupa:
 ● Use a sua própria roupa interior tipo tanga.
 ● Coloque um toalhete antibacteriano ou um pano não tecido bem humedecido ou gel condutor sobre o dispositivo.

Instruções de utilização

Este produto é utilizado dentro e fora da banheira. Coloque-o na parte inferior do corpo ao tomar banho.

- Antes de colocar o dispositivo na banheira, certifique-se de fechar a tampa da porta de carregamento.
- Coloque a parte acionada do dispositivo sob os quadris e os pés e certifique-se de que ambos os lados da parte acionada estejam em contacto uniforme com a pele.
- Mantenha premido o botão de ligar durante cerca de 2 segundos. O dispositivo emitirá um sinal sonoro e vibrará três vezes, indicando que foi ligado e está pronto a ser utilizado no nível de estimulação 1.

● Lembre-se de começar com o nível mais baixo de estimulação e aumentá-lo gradualmente à medida que o seu corpo se adapta à estimulação.

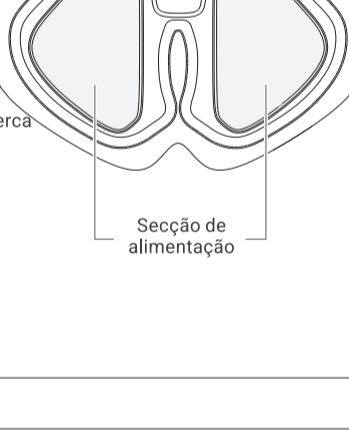

Aviso

- Proibido**
- Não desmonte, repare ou modifique o aparelho sob nenhuma circunstância, pois isso pode causar incêndios, choques elétricos e ferimentos. Se precisar de reparações, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente.

● Em caso de qualquer anomalia, desligue imediatamente o aparelho. Se o aparelho estiver a carregar, desligue rapidamente o adaptador CA específico da tomada elétrica. Não utilize o aparelho se ele emitir fumo, sons anormais ou odores.

● Não permita que entre água na porta de carregamento do dispositivo nem no conector de carregamento. Certifique-se de secar o dispositivo e o conector de carregamento antes de carregá-lo, pois isso pode causar incêndios provocados por descargas elétricas.

● Se sentir dor, desconforto ou incómodo na pele durante a utilização, pare imediatamente de usar o dispositivo e consulte um médico.

Precauções de segurança

Aviso

- Proibido**
- Utilize o adaptador CA específico fornecido com o produto. Não utilize outros acessórios ou produtos que não sejam os indicados.
 - Utilize corrente alternada de 100-240V. Se for utilizado no estrangeiro, confirme o tipo e a voltagem da tomada. Ligue o adaptador CA específico diretamente à tomada, sem utilizar tomadas múltiplas ou extensões, pois isso pode causar incêndios, choques elétricos e falhas de funcionamento.

● Quando terminar de utilizar o aparelho e o nível de corrente, certifique-se de que o primeiro. Se pretender limpar o adaptador CA dedicado, certifique-se de que o desliga primeiro da tomada, pois pode provocar incêndios causados por descargas elétricas.

● Ao desligar o adaptador CA da tomada, não puxe o cabo de alimentação. Segure o adaptador por um dos lados. Além disso, não toque na ficha com as mãos molhadas para evitar choques elétricos e incêndios.

Leia atentamente antes de usar pela primeira vez

● Antes de ler as "precauções de segurança", utilize o produto de forma correta e segura.

● Certifique-se de não dobrar a unidade principal. Verifique se a forma principal apresenta danos ou arranhões antes de utilizá-la.

● Utilize o produto uma vez por dia durante cerca de 15 minutos de cada vez. Pode utilizá-lo diariamente. Tenha cuidado de controlar a temperatura da água e o tempo de banho dentro de um intervalo que o seu corpo possa suportar.

● Para a primeira utilização, os idosos devem começar com o nível de estimulação mais fraco (nível 1).

● Os produtos magnéticos e os acessórios metálicos (colares, brinco, etc.) devem ser removidos antes da utilização.

● Não coloque as mãos na secção de potência durante a utilização, pois pode sentir uma forte corrente elétrica.

● Após a utilização, uma pequena quantidade de pó de carvão pode dissolver-se na água e causar a sua descoloração. Isto não é anormal. Se houver sujidade, enxague com água.

Antes de usar (Método de carregamento)

- Abra a tampa da porta de carregamento da unidade principal e conecte o conector de carregamento do adaptador CA específico fornecido à unidade principal.
- Insira o adaptador CA especial numa tomada elétrica.
 ● O carregamento começa quando a luz LED vermelha acender.
- Quando o carregamento estiver concluído, a luz LED azul acenderá. Desligue o adaptador CA especial da tomada e feche a tampa da porta de carregamento.

Sobre o carregamento da bateria

● Mesmo após o carregamento, o tempo de utilização da bateria pode diminuir consideravelmente, o que pode ser devido a um problema com a duração da bateria. (A vida útil da bateria pode variar dependendo das condições de utilização e armazenamento. O número de ciclos de carga e descarga possíveis é de aproximadamente 300-500 vezes.) ● Não tente substituir a bateria por conta própria. ● Se a unidade principal não for utilizada por um longo período, carregue-a completamente antes de guardá-la. Ligue o aparelho e carregue-o novamente a cada 3 meses. Se não carregar o dispositivo por um longo período, talvez não seja possível carregá-lo.

Aviso

- Proibido**
- Não guarde o aparelho na água nem o mergulhe na banheira, pois isso pode causar descoloração, deterioração ou mau funcionamento.
 - Não utilize o dispositivo fora da casa de banho e certifique-se de que o utilize na água, tal como previsto. Este produto foi concebido para ser utilizado numa banheira.
 - Não agredir os mãos dos componentes elétricos do aparelho durante a sua utilização, pois poderá sentir uma forte descarga elétrica.
 - Antes de utilizar, certifique-se de que o aparelho não está danificado. Não o utilize se estiver danificado, pois pode causar ferimentos e falhas de funcionamento.
 - Não utilize este produto para mais de duas pessoas e não o utilize se pesar mais de 100 kg, pois pode causar ferimentos e falhas de funcionamento.
 - Não utilize o seu corpo como álcool, diluentes, gasolina ou removedores de esmalte para limpar o aparelho e os seus acessórios.

Precauções de segurança

Advertência

- Cuidado**
- Se não sentir a estimulação de EMS, não ajuste o nível de intensidade de forma aleatória. Ajuste gradualmente o nível de intensidade e limite o uso a uma vez por dia, durante um máximo de 15 minutos por utilização. O estímulos excessivo e o uso repetido podem causar fadiga muscular, irritação da pele e vermelhidão.
 - Por favor, preste atenção à temperatura da água e ao tempo de banho, e utilize-os apenas dentro de um intervalo que o seu corpo possa tolerar. O calor excessivo e a exposição prolongada podem causar desconforto e sobreaquecimento.
 - Não utilize em conjunto com atividades de banho nem em áreas femininas. Em caso de inchaço total, enxague com água. Não utilize em áreas com alta temperatura e humidade, como saunas, pois pode causar dores, descoloração e mau funcionamento do equipamento.
 - Retire todos os produtos e acessórios magnéticos e metálicos, como colares e brinco, antes de utilizar o aparelho, pois podem causar ferimentos ou acidentes.

Antes de usar (Método de carregamento)

Quando carregar pela primeira vez ou quando o nível da bateria estiver baixo, desligue a alimentação da unidade principal antes de carregar.

Requisitos
 Certifique-se de limpar a água do terminal de carregamento da unidade principal com um cotonete e deixe secar completamente antes de carregar. Isso porque qualquer gota de água restante pode causar falhas de funcionamento.

● Tempo de carregamento e tempo de funcionamento: *
 Quando o nível da bateria está baixo
 Um sinal sonoro será emitido e o dispositivo vibrará duas vezes a cada 30 segundos.

Se o tempo de funcionamento é calculado aproximadamente em base na utilização do nível de estimulação 1. Por exemplo, a utilização do nível 10 durará aproximadamente 6,5 horas, e a utilização do nível 20 durará aproximadamente 4,5 horas. O tempo de carregamento e o tempo de funcionamento podem variar significativamente dependendo do nível da bateria e do ambiente de carregamento.

* A temperatura de carregamento recomendada é entre 15 e 35 graus Celsius. O carregamento fora da faixa de temperatura recomendada pode prolongar o tempo de carregamento ou impedir o carregamento completamente.

* Tenha em atenção que o tempo de uso da bateria pode ser reduzido após um período prolongado de inatividade antes do primeiro carregamento. No entanto, após vários ciclos de carregamento e uso repetido, ele voltará ao normal.

Conteúdo do conjunto e acessórios

*1 Sobre a secção de alimentação
 *2 Em relação às luzes LED

Ligar	Cor da luz	Estado
Após a ligação	Vermelha (intermitente)	Ligar
Durante o carregamento	Azul (intermitente)	Carregando
	Azul (contínua)	Carga completa

Acessórios
 Adaptador CA especial para terminal de carga

● A unidade principal tem uma especificação de impermeabilidade IPX-8 (nível de proteção impermeável JIS). Mergulhe-a em água quente com a tampa da porta de carregamento bem fechada. Após a utilização, retire-a imediatamente da água quente. Não a deixe na água por mais do que 20 minutos.
 ● O adaptador CA especial não é resistente à água. Não o guarde em locais húmidos. E estritamente proibido utilizá-lo em condições de humidade ou carregá-lo na casa de banho.

Aviso

- Cuidado**
- Para utilizadores inexperientes, especialmente idosos, é essencial começar com o nível mais baixo de estimulação (nível 1) e utilizá-lo por um curto período de tempo. Isto porque pode causar acidentes e lesões. Ajuste o nível gradualmente à medida que o corpo se adapta.
 - Após a utilização, é importante lavá-lo com água, colocá-lo num saco de malha seco e secá-lo num local bem ventilado e fresco. Isto porque deixar o aparelho húmido pode causar a sua deterioração.

Conteúdo do conjunto e acessórios

Conteúdo do conjunto
 Caso falte alguma peça, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente.

Produto	MYTREX AQUALIFT unidade principal x1
	Adaptador x1
Acessórios	Manual de instruções x1
	Saco de secagem em malha x1

● O design e as especificações da unidade principal e dos acessórios podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio, com o objetivo de melhorar a qualidade.
 ● Este produto não é um dispositivo médico.

● A unidade principal de este produto contém uma bateria de lítio integrada. Descarte o produto de acordo com a normativa da sua zona.



● Se o botão de intensidade for pressionado continuamente, a intensidade aumentará gradualmente.

● Se o botão de intensidade for pressionado continuamente, a intensidade diminuirá gradualmente.

● Durante o carregamento e o carregamento, a cor e o estado das luzes LED mudarão.

● Abre-se com uma tampa exterior e contém o terminal de carregamento.