

MYTREX

Sotsu Medical Co., Ltd.
3-10-5F, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture, Japan
Conçu au Japon. Fabriqué en Chine.
www.mytrex.es

Service clientèle en Espagne et au Portugal MYTREX
Atención al cliente en España y Portugal de Mytrex S.L. - 914 22 474 20 107
Produt distribuït per: Mytrex Sotsu S.L.
Produt distribuït per: Mytrex Sotsu S.L.
Servici al client: 914 22 474 20 107

MYTREX RAKUNO FIT

Manuel d'instructions



Merci beaucoup d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et utiliser le produit correctement et en toute sécurité. Veuillez le conserver soigneusement même après l'avoir lu.

Précautions de sécurité

Suivez les procédures prescrites et utilisez le produit sans forcer. En cas d'anomalie, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez notre service clientèle. Continuer à utiliser le produit dans un état de dysfonctionnement peut présenter un risque d'effets néfastes pour la santé et doit être strictement évité.

Cette section explique les précautions de sécurité importantes à respecter strictement afin d'éviter les blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes, ainsi que tout dommage matériel.

À propos des étiquettes d'avertissement

Les symboles suivants sont utilisés pour indiquer la gravité des dangers ou des dommages pouvant résulter d'une utilisation inappropriée :



AVERTISSEMENT

Indique « risque de mort ou de blessures graves » si le produit est utilisé de manière incorrecte.



ATTENTION

Indique « risque de blessures légères ou de dommages matériels » si le produit est utilisé de manière incorrecte.



AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser dans les cas suivants.

- Cela pourrait provoquer des accidents ou empirer les symptômes.
- Les personnes à qui un médecin a interdit de recevoir des massages. Exemples : thrombose, embolie, anévrismes graves, varices aiguës, diverses formes de dermatite, infections cutanées, etc.
- Les personnes souffrant de troubles circulatoires graves au niveau des jambes.

Ne laissez pas des personnes incapables d'exprimer leurs intentions ou de manipuler le produit l'utiliser. Cela peut provoquer des accidents ou des blessures.

Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser ou jouer avec ce produit.

Ne pas utiliser sur les animaux domestiques. Cela peut provoquer des accidents, des blessures ou des problèmes de santé.

Ne pas utiliser sur d'autres parties du corps que le mollet. Ne pas utiliser sur le cou. Cela peut provoquer des accidents ou des blessures.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas le produit lorsque des accessoires ou d'autres objets durs se trouvent à proximité de la zone d'utilisation. Cela peut provoquer des accidents ou des blessures.

N'utilisez pas le produit lorsque vous conduisez une voiture ou un vélo ni lorsque vous effectuez d'autres tâches. Ne restez pas debout et ne marchez pas pendant son utilisation. Cela peut provoquer des accidents ou des blessures.

N'utilisez pas le produit sous une couverture. Ne l'utilisez pas lorsque vous fumez, à proximité d'appareils de chauffage ou sur des tapis chauffants. Cela peut provoquer des accidents, des décharges électriques ou des incendies.

Ne laissez pas de feu, d'objets étrangers, de poussière ou d'humidité adhérer au câble USB, à l'adaptateur ou aux ouvertures de l'unité principale ou des accessoires. Cela peut provoquer des décharges électriques, des courts-circuits ou des incendies.



AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser dans les cas suivants.

- Cela pourrait provoquer des accidents ou empirer les symptômes.
- Les personnes à qui un médecin a interdit de recevoir des massages. Exemples : thrombose, embolie, anévrismes graves, varices aiguës, diverses formes de dermatite, infections cutanées, etc.
- Les personnes souffrant de troubles circulatoires graves au niveau des jambes.

Ne laissez pas des personnes incapables d'exprimer leurs intentions ou de manipuler le produit l'utiliser. Cela peut provoquer des accidents ou des blessures.

Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser ou jouer avec ce produit.

Ne pas utiliser sur les animaux domestiques. Cela peut provoquer des accidents, des blessures ou des problèmes de santé.

Ne pas utiliser sur d'autres parties du corps que le mollet. Ne pas utiliser sur le cou. Cela peut provoquer des accidents ou des blessures.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas une batterie lithium-ion endommagée. Cela peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dommages.

N'exercez pas de force excessive sur le câble USB, par exemple en l'endommageant, en le modifiant ou en l'attachant. Ne placez pas non plus d'objets lourds dessus. Ne le manipulez pas brutalement et ne ne le jetez pas. Cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit, un incendie ou un dysfonctionnement.

No utilizez le produit et le câble USB s'ils sont défectueux ou si l'encolure est suintante. Cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

Lorsque vous débranchez le câble USB, tenez le connecteur et ne tirez pas sur le câble. Ne le débranchez pas non plus avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.



AVERTISSEMENT

Étant donné que ce produit contient une batterie lithium-ion, les actions suivantes sont strictement interdites.

Ne pas utiliser dans les cas suivants.

- Appliquer de la chaleur ou jeter au feu.
- Utiliser, charger ou laisser le produit dans des environnements à températures élevées.
- Utiliser, charger ou laisser le produit sous une couverture ou à proximité d'appareils de chauffage.
- Utiliser, charger ou laisser le produit dans des zones à températures élevées.
- Si vous constatez l'une des anomalies suivantes, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez notre service clientèle. Cela peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dommages.
- Les personnes souffrant de troubles circulatoires graves au niveau des jambes.
- Le produit ne fonctionne pas même après avoir été chargé.
- La durée de fonctionnement du produit devient extrêmement courte.
- Le produit chauffe excessivement pendant le chargement.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas une batterie lithium-ion endommagée. Cela peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dommages.

N'exercez pas de force excessive sur le câble USB, par exemple en l'endommageant, en le modifiant ou en l'attachant. Ne placez pas non plus d'objets lourds dessus. Ne le manipulez pas brutalement et ne ne le jetez pas. Cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit, un incendie ou un dysfonctionnement.

No utilizez le produit et le câble USB s'ils sont défectueux ou si l'encolure est suintante. Cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

Lorsque vous débranchez le câble USB, tenez le connecteur et ne tirez pas sur le câble. Ne le débranchez pas non plus avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.



AVERTISSEMENT

Étant donné que ce produit contient une batterie lithium-ion, les actions suivantes sont strictement interdites.

Ne pas utiliser dans les cas suivants.

- Appliquer de la chaleur ou jeter au feu.
- Utiliser, charger ou laisser le produit dans des environnements à températures élevées.
- Utiliser, charger ou laisser le produit sous une couverture ou à proximité d'appareils de chauffage.
- Utiliser, charger ou laisser le produit dans des zones à températures élevées.
- Si vous constatez l'une des anomalies suivantes, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez notre service clientèle. Cela peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dommages.
- Les personnes souffrant de troubles circulatoires graves au niveau des jambes.
- Le produit ne fonctionne pas même après avoir été chargé.
- La durée de fonctionnement du produit devient extrêmement courte.
- Le produit chauffe excessivement pendant le chargement.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas une batterie lithium-ion endommagée. Cela peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dommages.

N'exercez pas de force excessive sur le câble USB, par exemple en l'endommageant, en le modifiant ou en l'attachant. Ne placez pas non plus d'objets lourds dessus. Ne le manipulez pas brutalement et ne ne le jetez pas. Cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit, un incendie ou un dysfonctionnement.

No utilizez le produit et le câble USB s'ils sont défectueux ou si l'encolure est suintante. Cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

Lorsque vous débranchez le câble USB, tenez le connecteur et ne tirez pas sur le câble. Ne le débranchez pas non plus avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.



AVERTISSEMENT

Étant donné que ce produit contient une batterie lithium-ion, les actions suivantes sont strictement interdites.

Ne pas utiliser dans les cas suivants.

- Appliquer de la chaleur ou jeter au feu.
- Utiliser, charger ou laisser le produit dans des environnements à températures élevées.
- Utiliser, charger ou laisser le produit sous une couverture ou à proximité d'appareils de chauffage.
- Utiliser, charger ou laisser le produit dans des zones à températures élevées.
- Si vous constatez l'une des anomalies suivantes, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez notre service clientèle. Cela peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dommages.
- Les personnes souffrant de troubles circulatoires graves au niveau des jambes.
- Le produit ne fonctionne pas même après avoir été chargé.
- La durée de fonctionnement du produit devient extrêmement courte.
- Le produit chauffe excessivement pendant le chargement.

Conditions d'utilisation

Innov8 Iberia S.L. garantit ce produit pendant une période de 3 ans pour toutes les pièces et contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement à compter de la date de livraison au consommateur final, sans aucun frais pour ce dernier.

Cette garantie n'est pas valable dans les cas suivants :

- Si les données de la garantie ou la preuve d'achat ne correspondent pas au produit.
- Si le produit a été utilisé dans des conditions autres que normales ou s'il a été utilisé sans tenir compte du manuel d'instructions accompagnant ce document de garantie.
- Si le produit a été ouvert ou modifié par du personnel non autorisé.



AVERTISSEMENT

Ne retirez pas, ne déchirez pas et ne coupez pas intentionnellement la partie en tissu de l'unité principale. Cela peut provoquer des accidents, des chocs électriques ou des blessures.

Ne pas exposer d'eau l'unité principale ni les accessoires, ni les utiliser dans des endroits humides tels que les salles de bains ou à l'extérieur. Cela pourrait provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit. Cela peut provoquer des incendies, des dysfonctionnements ou des accidents.



AVERTISSEMENT

Consultez un médecin avant utilisation si vous appartenez à l'une des catégories suivantes.

Utilisation du produit peut entraîner des accidents, des blessures ou des problèmes de santé. Même si aucun des points suivants ne s'applique, consultez un médecin si vous avez des doutes quant à l'utilisation du produit.

- Personnes utilisant des dispositifs médicaux électriques implantés susceptibles de subir des interférences électromagnétiques, tels que des stimulateurs cardiaques.
- Personnes atteintes de tumeurs malignes.
- Personnes souffrant de cardiopathies, de troubles cardiaques ou de thromboses.
- Personnes souffrant de troubles circulatoires, de dilatation capillaire ou d'une pression artérielle anormale.
- Femmes enceintes ou ayant récemment accouché.
- Personnes sous traitement médicamenteux.
- Les personnes souffrant de troubles sensoriels dus à des troubles circulatoires périphériques avancés tels que le diabète.
- Les personnes présentant des anomalies cutanées telles que des plaies, de l'eczéma ou des éruptions cutanées.
- Les personnes souffrant d'une altération de la sensation thermique.
- Les personnes nécessitant un repos au lit ou celles souffrant d'un handicap au niveau des membres.



AVERTISSEMENT

Matériau	Résine ABS, polyester, nylon, PP, silicone, etc.
Taille compatible	Circumference du mollet : jusqu'à 48 cm
Environnement opérationnel	Température : 5 °C-40 °C Humidité relative : ≤85 % RH
Temps nominal	10 minutes
Fabricant/distributeur	SOTSU MEDICAL CO., LTD.
Pays de fabrication	Chine

* Mesuré à 25 °C en fonctionnement sans charge. Le temps réel peut varier en fonction de l'environnement et des conditions d'utilisation.

Spécifications du produit

Marque	MYTREX
Nom du produit	RAKUNO FIT
Número de modèle	MT-RKF-2580 (design) MT-RKF-25P (rose).
Alimentation nominale	5 V 1 A (uniquement avec symbole de classe II)
Consommation nominale	9,6 W (chauffeur : 5 W)
Batterie	Batterie lithium-ion 3,7 V, 4800 mAh
Taille	Environ 350 mm × 628 mm × 45 mm
Poids	Environ 650 g
Durée de fonctionnement*	Durée maximale de fonctionnement : environ 5,5 heures Durée minimale de fonctionnement : environ 3,5 heures



AVERTISSEMENT

Consultez un médecin avant utilisation si vous appartenez à l'une des catégories suivantes.

Utilisation du produit peut entraîner des accidents, des blessures ou des problèmes de santé. Même si aucun des points suivants ne s'applique, consultez un médecin si vous avez des doutes quant à l'utilisation du produit.

- Les personnes dont la température corporelle est supérieure ou égale à 38 °C (période fébrile) (par exemple, celles qui présentent des symptômes inflammatoires aigus importants tels que fatigue, frissons ou fluctuations de la tension artérielle, ou qui sont physiquement affaiblies).
- Les personnes qui se sentent mal ou qui présentent des conditions physiques chroniques.
- Personnes souffrant d'effractions aiguës (liées à la douleur) telles que fractures, ostéoporose, fractures vertébrales, entorses ou elongations musculaires.
- Personnes présentant des anomalies de la colonne vertébrale ou une scoliose.
- Personnes souffrant de tendinite.
- Personnes actuellement en traitement dans un établissement médical.
- Les personnes qui utilisent le produit sur des zones précédemment traitées, opérées ou affectées par des maladies.
- Les personnes extrêmement faibles ou épuisées.
- Les personnes qui ne peuvent pas exprimer leurs intentions ou manipuler le produit.
- Les personnes souffrant de troubles rénaux, de troubles de la sensibilité cutanée, d'une constitution génétique de maladies cutanées, de dermatite atopique ou d'une peau sensible.



AVERTISSEMENT

Cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin si vous remarquez une anomalie pendant son utilisation.

Utilisez uniquement le câble USB fourni. L'utilisation d'autres câbles peut entraîner des dysfonctionnements. N'utilisez pas les accessoires avec d'autres produits.



AVERTISSEMENT

Problèmes	Causes possibles et solutions
Le produit n'est pas fonctionnel.	« Le niveau de batterie est faible ? » → Chargez le produit.
Le produit s'arrête brusquement.	« Avez-vous utilisé de manière continue ? » « Avez-vous utilisé le produit pendant longtemps ? » « Le niveau de la batterie est-il faible ? » « Si environ 10 minutes se sont écoulées depuis que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation, il est possible que la batterie ait atteint son état de charge. Si vous le laissez sans charge pendant une longue période, la batterie risque de ne plus pouvoir se recharger. En raison de la nature des batteries lithium-ion, une diminution progressive de la charge se produira même pendant le stockage. » « Pour éviter l'accumulation de poussière pendant le stockage à long terme, couvrez le produit avec un chiffon ou un matériau similaire. » « Vous pouvez l'enrouler de manière compacte et le fixer avec la fermeture auto-serrante pour le ranger. (Figure 1) »

Résolution des problèmes

Avant de nous contacter, veuillez vérifier les points suivants. Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le magasin où vous l'avez acheté ou notre service clientèle. Ne démontez, ne réparez et ne modifiez en aucun cas le produit.

Problèmes	Causes possibles et solutions
Le produit n'est pas fonctionnel.	« Le niveau de batterie est faible ? » → Chargez le produit.
Le produit s'arrête brusquement.	« Avez-vous utilisé de manière continue ? » « Avez-vous utilisé le produit pendant longtemps ? » « Le niveau de la batterie est-il faible ? » « Si environ 10 minutes se sont écoulées depuis que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation, il est possible que la batterie ait atteint son état de charge. Si vous le laissez sans charge pendant une longue période, la batterie risque de ne plus pouvoir se recharger. En raison de la nature des batteries lithium-ion, une diminution progressive de la charge se produira même pendant le stockage. » « Pour éviter l'accumulation de poussière pendant le stockage à long terme, couvrez le produit avec un chiffon ou un matériau similaire. » « Vous pouvez l'enrouler de manière compacte et le fixer avec la fermeture auto-serrante pour le ranger. (Figure 1) »




AVERTISSEMENT

Si le produit fonctionne mal, cessez immédiatement d'utiliser et éteignez-le. Si le produit fonctionne mal pendant le chargement, ou en cas d'orage ou de coupure de courant, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise murale.

Ne laissez pas le produit fonctionner pendant une longue période. Si le produit présente un état anormal, par exemple s'il émet de la fumée, des bruits étranges ou des odeurs, cela pourrait provoquer des accidents ou des incendies.

Comment conserver

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez-le et déroulez le câble USB avant de le ranger.
- Ne rangez pas le produit à proximité d'une source de chaleur, à la lumière directe du soleil, dans une salle de bain, à l'intérieur d'une voiture ou dans tout autre environnement où la température ou l'humidité est élevée.
- Rangez le produit hors de portée des enfants.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit pendant une longue période, chargez complètement l'unité principale avant de ranger. Utilisez et rechargez le produit environ une fois par mois. Si vous le laissez sans charge pendant une longue période, la batterie risque de ne plus pouvoir se recharger. En raison de la nature des batteries lithium-ion, une diminution progressive de la charge se produira même pendant le stockage.
- Pour éviter l'accumulation de poussière pendant le stockage à long terme, couvrez le produit avec un chiffon ou un matériau similaire.
- Vous pouvez l'enrouler de manière compacte et le fixer avec la fermeture auto-serrante pour le ranger. (Figure 1)

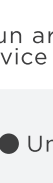

AVERTISSEMENT

Ne pas enrouler le câble USB autour de l'unité principale pendant le stockage. Cela peut provoquer des accidents, des chocs électriques ou des blessures.

N'utilisez pas d'adaptateur secteur qui ne dispose pas d'une sortie DC5V/1A, d'une protection contre les décharges électrostatiques de classe II, (*). Cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.

Comment installer

1. Appuyez sur le bouton de réglage du niveau d'air (H) pour régler l'intensité de la lumière.

2. Pour utiliser la fonction de chauffage, appuyez sur le bouton de réglage du niveau de chaleur (H).

3. Pour éteindre l'appareil pendant son utilisation, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (C).



AVERTISSEMENT

Si la charge commence, et les voyants LED à LED4 clignotent dans l'ordre, suivez les étapes 1 à 4.

Étape 1 : Saisissez l'extrémité du ruban auto-adhésif et attachez-le à l'extérieur du mollet.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton auto-adhésif et bien fixé afin qu'il adhère au mollet.


Étape 3 : Appuyez sur le bouton de réglage du niveau d'air (H) pour régler l'intensité de la lumière.

Étape 4 : Appuyez sur le bouton de réglage du niveau de chaleur (H) pour régler l'intensité de la chaleur.

Étape 5 : Appuyez sur le bouton d'alimentation (C) pour éteindre l'appareil.

Noms des pièces

Unité principale

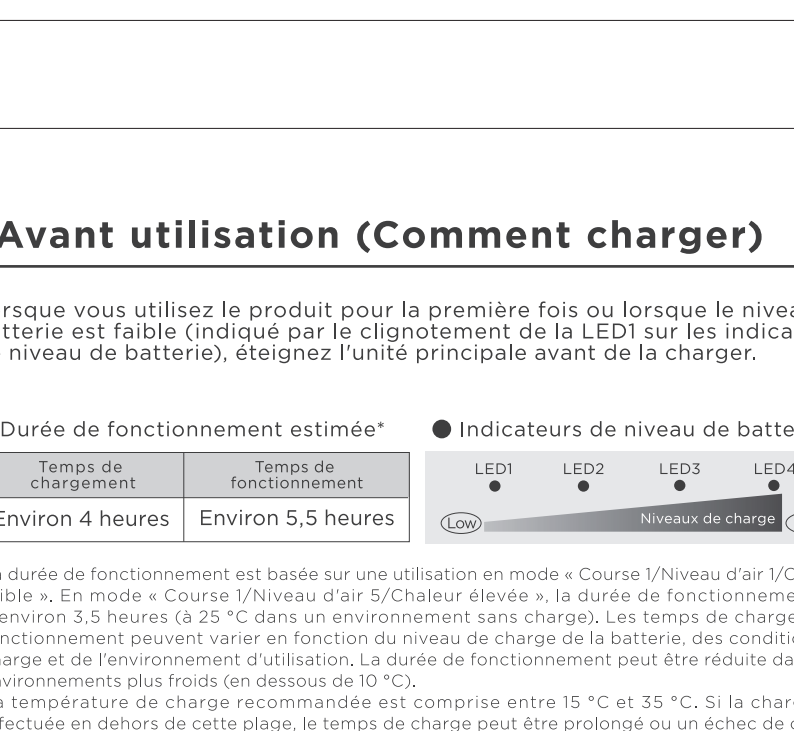

Conception ambidextre.
Ce produit peut être utilisé sur les deux jambes.
*Ce produit est destiné à être utilisé sur une seule jambe.



AVERTISSEMENT

Ne pas enrouler le câble USB autour de l'unité principale pendant le stockage. Cela peut provoquer des accidents, des chocs électriques ou des blessures.

N'utilisez pas d'adaptateur secteur qui ne dispose pas d'une sortie DC5V/1A, d'une protection contre les décharges électrostatiques de classe II, (*). Cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.

Comment l'utiliser

1. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

2. Branchez l'adaptateur secteur à l'unité principale.

3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

4. Branchez l'adaptateur secteur à l'unité principale.



AVERTISSEMENT

Ne pas enrouler le câble USB autour de l'unité principale pendant le stockage. Cela peut provoquer des accidents, des chocs électriques ou des blessures.

N'utilisez pas d'adaptateur secteur qui ne dispose pas d'une sortie DC5V/1A, d'une protection contre les décharges électrostatiques de classe II, (*). Cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.

Avant utilisation (Comment charger)

Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois ou lorsque le niveau de batterie est faible (indiqué par le clignotement de la LED) sur les indicateurs de niveau de batterie, éteignez l'unité principale avant de la charger.

1. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

2. Branchez l'adaptateur secteur à l'unité principale.

3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

4. Branchez l'adaptateur secteur à l'unité principale.



AVERTISSEMENT

Ne pas enrouler le câble USB autour de l'unité principale pendant le stockage. Cela peut provoquer des accidents, des chocs électriques ou des blessures.

N'utilisez pas d'adaptateur secteur qui ne dispose pas d'une sortie DC5V/1A, d'une protection contre les décharges électrostatiques de classe II, (*). Cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.